

Samoa

Полиграфический аппарат.
Smart, Simple & Small.

Базовый аппарат на нагрудном ремне, который фиксирует Samoa на теле, и заранее присоединённая канюля.



- 1 Samoa с нагрудным ремнём
- 2 Назальная канюля
- 3 Абдоминальный ремень
- 4 Пульсоксиметрический датчик
- 5 Ремешок с крючком и петлей для запястья.

Узнай больше о Samoa:



LÖWENSTEIN medical

Уполномоченный представитель

ООО „ЛВЕНШТАЙН МЕДИКАЛ РУС“

Ул. Гостиничная, д.5, 127106

Москва, Россия

T: +7 916 927 85 86

+7 495 150 77 38

LMRussia@loewensteinmedical.com

www.loewensteinmedical.com

Главный офис

Löwenstein Medical

Arzbacher Straße 80

56130 Bad Ems, Германия

T. +49 2603 9600-0

Ф. +49 2603 9600-50

info@loewensteinmedical.com

loewensteinmedical.com



Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH

Daimlerstr. 23

72414 Rangendingen, Германия

With people in mind

LÖWENSTEIN medical

Краткая инструкция для пациентов

Samoa

Полиграфический аппарат

Уважаемый пациент,

Ваш врач выдал Вам диагностический аппарат на дом для обнаружения потенциального нарушения сна.

В связи с этим, данная инструкция расскажет Вам как надеть аппарат на себя. Правильное расположение аппарата необходимо для наиболее точного сигнала.



© Авторское право защищено. Воспроизведение любого рода только с явно выраженного разрешения от Löwenstein Medical.

Как мне надеть полиграфический аппарат Samoa?



1. Наденьте устройство с нагрудным ремнем поверх футболки и ниже подмышек. Samoa должен сидеть плотно, но удобно. Только в этом случае датчики будут работать с большей точностью.





2. Наденьте пояс для живота на уровне бедер. Датчик давления должен находиться на внутренней стороне ремня.



3. Соедините черный разъем на брюшном ремне и черный разъем в нижней части устройства и закрутите их примерно на пол-оборота.



4. Поместите пальцевой датчик на безымянный палец. Во-первых, ногти следует коротко подстричь и удалить лак с ногтей. Вставьте палец в серую сенсорную втулку так, чтобы кабель проходил по тыльной стороне ладони. Прикрепите кабель с помощью ремешка с крючком и петлей к запястью.

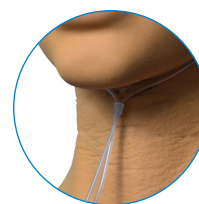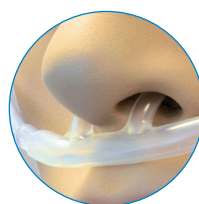


5. Теперь наденьте носовую канюлю, поместив маленькие трубки в ноздри. Трубки канюли следует провести за ушами и под подбородком, затем закрепить пластиковым кольцом.



6. Если назальная канюля еще не подсоединена, прикрутите ее к имеющемуся белому разъему в нижней части устройства.

Мониторинг терапии


Закрепите T-образный переходник на месте между трубкой и маской для контроля терапии. Прикрутите трубку T-образного адаптера к свободному белому разъему в нижней части устройства. **Назальную канюлю использовать нельзя!**

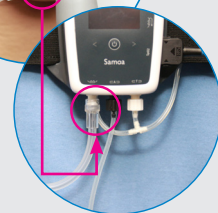


Начать запись

Автоматический запуск


Запись начнется и завершится автоматически в заданный врачом промежуток времени.

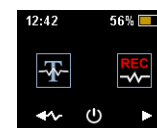

Ручной запуск

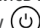Чтобы начать запись вручную, удерживаете нажатой клавишу  примерно в течение двух (2) секунд, пока дисплей не включится и ни появится показанный здесь экран.



Нажмите клавишу со стрелкой вправо . Запись начнется по завершении обратного отсчета от пяти (5) до нуля (0). Во время записи на дисплее загорается красный индикатор

Остановка записи

Устройство автоматически завершит запись. Вам **не нужно ничего делать**.

На следующее утро, когда запись закончится, пожалуйста, положите все части в сумку и верните ее врачу.

ПРИМЕЧАНИЕ: По гигиеническим соображениям вам следует поместить назальную канюлю в отдельный пакет!