

Cryo

Zimmer

CRYO 6



Охлаждение холодным воздухом является широко используемой методикой в физиотерапии. Компания Zimmer MedizinSysteme в течение более чем 30 лет разрабатывает и выпускает устройства терапии холодным воздухом на своей производственной площадке в Ной-Ульме.

Продав почти 40 000 устройств по всему миру, компания Zimmer MedizinSysteme является лидером мирового рынка и задает стандарты в этой области.

Сейчас устройства серии Cryo во всем мире являются незаменимыми при повседневной работе с пациентами для физиотерапевтов, специалистов спортивной медицины, матологов, а также в больницах.

Zimmer MedizinSysteme
Изготовлено в Германии


Высочайшая степень эффективности благодаря передовой технологии

Сryo 6 – превосходная система для охлаждения ткани и кожи. Важной терапевтической характеристикой терапии холодным воздухом является бесконтактное охлаждение.

Уровень содержания водяного пара в воздухе уменьшается по мере снижения температуры, таким образом холодный воздух устройства Сryo представляет собой сухой метод терапии с температурой на выходе до -35°C . В результате риск обморожения снижается до минимума.

Во время применения холодного воздуха – в противоположность применению охлаждающих пакетов или пузырей со льдом – на коже не образуется влажный слой, создаваемый паром, который затрудняет обеспечение длительного охлаждения. Поэтому охлаждение холодным воздухом более эффективно.



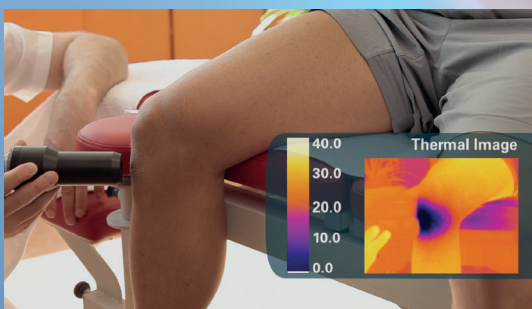

Широкий спектр применения

Терапия холодным воздухом применима для кратковременного, быстрого и интенсивного охлаждения кожи, а также для более длительных периодов умеренного охлаждения с целью снижения температуры до терапевтически приемлемых уровней даже в более глубоких слоях кожи.

Эффективность терапии холодным воздухом доказана при следующих состояниях:

- Болезненные состояния мышечно-скелетной системы (острые и хронические), такие как артрит, бурсит, тендинит, тендовагинит, миозит, фиброзит, мышечное напряжение, цервикальный синдром, нарушения после хлыстовой травмы, поясничный синдром или травмы (кровоподтеки, растяжения, вывихи) мышц или суставов
- Ослабление боли, улучшение подвижности и снижение ригидности суставов при ревматических заболеваниях, а также в случае ревматоидного артрита (прогрессирующий хронический полиартрит)
- Неврологические заболевания для снижения спастичности (такие как рассеянный склероз или постинсультная гемиплегия)

Убедительный успех лечения при применении холодного воздуха

Комбинации с терапией ХОЛОДНЫМ ВОЗДУХОМ

Надлежащая комбинация с холодным воздухом обеспечивает поддерживающий эффект

Терапию холодным воздухом можно широко комбинировать, например, с лечебной гимнастикой, путем предварительного применения холода (15-20 минут воздействия холодным воздухом).

Другие возможные комбинации:

- Комбинирование с компрессией в случаях острых травм
- При дерматологическом или косметическом лечении для ослабления боли во время и после терапии в случае лазерной или фотодинамической терапии
- Лечение мышечных курковых зон в комбинации с растяжкой

Специальные программы для спортивной медицины и травматологии

Многие спортивные врачи-физиотерапевты и специалисты по спортивной медицине используют устройство Сгуо 6 для предотвращения образования отеков и гематом, а также для раннего профилактического лечения сразу после тяжелых физических нагрузок при занятиях спортом, еще до появления симптомов, например, после спортивных соревнований. Специальные программы обеспечивают поддержку в лечении гематом, контузий, растяжений, вывихов и отечности.



СВУХО 6

в вашей практике



Удобный для пользователя, экологичный и неприхотливый в обслуживании

Простое управление

Большой дисплей с четкой индикацией устройства Свуо 6 обеспечивает быстрое и интуитивно понятное управление. Предустановленные программы можно выбирать при помощи удобных кнопок управления. Выберите программу, нажмите «Start» и устройство готово к работе! Отдельно заказываемый шарнирный рычаг облегчает работу со свободными руками, особенно во время длительных сеансов лечения. К воздушной трубке можно подсоединять специальные насадки для воздействия на большие участки или для нацеленного воздействия. Поток воздуха легко контролируется пользователем.

Экономические характеристики

Воздух окружающей среды фильтруется и охлаждается в замкнутом контуре охлаждения до -30°C .

- Рентабельность: отсутствуют расходные материалы
- Высокая эффективность: может работать в течение всего дня
- Практичность: большая стеклянная полка идеально подходит для размещения других устройств
- Легкое техническое обслуживание благодаря наличию функции оттаивания и воздушному фильтру, который можно очищать всасыванием воздуха

Задаваемые пользователем программы

Устройство Сгуо 6 позволяет управлять тремя задаваемыми пользователем программами. Таким образом, нажатием кнопки вы можете легко сохранить свои параметры и в любое время получить к ним доступ. При запуске устройства автоматически загружается первая заданная пользователем программа. Таким образом, наиболее часто используемая программа готова к немедленному запуску.

Преимущества:

- Регулируемая скорость потока
- Точная локализация холодного воздуха: поверх больших или целевых участков с использованием различных насадок
- Легкое управление и безопасное применение благодаря понятному функциональному назначению и легкому для чтения дисплею
- Отсутствие расходных материалов



Краткий обзор преимуществ

CRYO CRYO-6



Технические данные

Разъем электропитания	220-240 В / 50 Гц (7 А) 240 В / 60 Гц (7 А) 100-120 В / 50-60 Гц (11 А)
Макс. потребление мощности во время терапии	1,3 кВт
Функционирование в режиме ожидания	10 Вт
Применимая часть	Тип В
Длина терапевтической трубки	180 см
Размеры корпуса	В 645 мм / Ш 390 мм / Д 680 мм
Вес	75 кг

Дополнительно



Шарнирный рычаг



Световая трубка



Колесо с тормозом

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 (0)7 31. 97 61-291
Fax +49 (0)7 31. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer.de

Zimmer
MedizinSysteme